

# iAcne

basall

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO BASALL!

Leia este manual com atenção antes do uso e guarde-o de forma adequada para futuras consultas.

Recomendamos a conservação da embalagem do aparelho para o caso de eventuais dificuldades técnicas.



Número do certificado: TÜV 12.1578



## Responsabilidade

---

Cabe ao proprietário, identificado na nota fiscal, a total responsabilidade pelo produto iAcne, garantindo que o mesmo não será repassado, emprestado ou utilizado em terceiros sem que estes tenham lido e compreendido o manual do usuário, estando cientes dos riscos que o produto poderá causar se for utilizado de forma inadequada.

O uso inadequado deste produto poderá gerar sequelas irreparáveis para o usuário ou terceiros. Mantenha o produto sempre longe do alcance de crianças.

O iAcne foi exaustivamente testado e aprovado pelos órgãos sanitários competentes, estando apto para utilização em todo território nacional. Os tratamentos consistem em aplicações periódicas, com intervalos variáveis, de acordo com cada usuário e condição clínica. O usuário precisa estar absolutamente ciente que, os resultados só poderão ser alcançados se for seguido rigorosamente o protocolo contido neste manual.

**Responsabilidade sobre os resultados:**



A tecnologia do iAcne é baseada em uma série de estudos científicos que comprovam sua eficácia e segurança. Entretanto este dispositivo tem uma obrigação de meio e não de fim. Isso significa que cada paciente pode reagir de forma diferente ao tratamento. A eficácia dos resultados depende de fatores fisiológicos de cada organismo e da forma de aplicação, não havendo garantia de resultados por parte do fabricante ou distribuidor.

---

Introdução	04
Tecnologia	05
Dentro da Embalagem	06
Estrutura do Equipamento	07
Manutenção e limpeza do aparelho	08
Instrução de Uso	09
Advertências e Precauções	11
Contra Indicação	13
Efeito Colateral	15
Proteção do Meio Ambiente	16
Solução de Problemas	17
Especificação	18
Acondicionamento	19
Transporte	19
Manutenção	19
Satisfação	19
Pictogramas	20

Quem nunca acordou, olhou para o espelho e deu de cara com aquela espinha indesejada? Só que agora você tem a solução certa. Experimente Basall iAcne que chegou para revolucionar o tratamento contra espinhas! Em apenas 24h você vai ver e sentir os resultados, sem manchas, nem marcas na pele. Tudo isso acontece porque Basall iAcne age no foco da inflamação, sua inovadora tecnologia de Termo Fototerapia emite uma poderosa luz violeta que age diretamente nas bactérias causadoras da acne, destruindo-as e eliminando o mal pela raiz. Leve e portátil Basall iAcne te acompanha para qualquer lugar.

## Tecnologia

---

A acne é uma doença dos folículos pilossebáceos, estruturas formadas por glândulas sebáceas e pelos. Geralmente causada por um distúrbio da queratinização folicular (“poros entupidos”), aumento da secreção de sebo e presença de bactérias (*Propionibacterium acnes*).

O iAcne age no foco da inflamação, a luz violeta possui efeito fotodestrutivo do *P. acnes*, o que pode explicar, em parte, a diminuição da severidade da acne no verão. A luz violeta (415nm) é efetiva no desencadeamento da excitação das coproporfirina e também induz alterações no pH intracelular, afetando o influxo transmembrana de proteínas e causando dano nessa bactéria. A irradiação de colônias de *P. acnes* com luz violeta visível leva à fotoexcitação das porfirinas bacterianas endógenas, produção de oxigênio singlet e subsequente destruição bacteriana.

Associada à aplicação de calor localizado há uma melhora na circulação local garantindo o fluxo de oxigênio e uma melhor nutrição celular, auxiliando ainda mais na regeneração da região inflamada.

A termo fototerapia, quando usada nos quadros de acne leves a moderados, apresenta uma boa opção terapêutica com remissões prolongadas das lesões, sendo em geral bem tolerada e sem efeitos colaterais significativos.

## Dentro da Embalagem

---



1. Aparelho iAcne



2. Pilha (AA)




3. Manual do usuário



4. Certificado de Garantia

## Estrutura do Equipamento

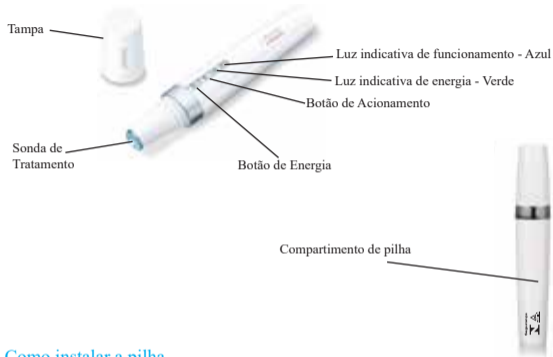

### Como instalar a pilha

1. Abra a tampa do compartimento de pilha e instale uma pilha alcalina\* AA, certificando-se que as polaridades da pilha estejam posicionadas corretamente.
2. Feche a tampa do compartimento de pilhas adequadamente.

\* Utilize apenas pilhas alcalinas

Indicação de pilha fraca: Quando a pilha estiver fraca, o aparelho para de funcionar automaticamente e a Luz Indicativa de Energia começa a piscar. Após 5 segundos, o aparelho desliga automaticamente.

## Manutenção e limpeza do aparelho

- Desligue o aparelho antes de realizar a limpeza.
- Remova a tampa com cuidado. Passe um pano limpo com água morna e sabão ou álcool na Sonda de Tratamento (sempre limpe a Sonda de Tratamento antes e depois de cada uso). Isso ajuda a evitar a disseminação dos germes. Os germes podem causar infecções.
- Após o uso, guarde sempre o aparelho longe da luz direta solar, umidade e calor excessivo;
- Se não for utilizá-lo por longos períodos, remova as pilhas.
- Qualquer anormalidade veja Solução de Problemas na página 6, se persistir contate a Basall. Nunca desmonte o aparelho.

É importante fazer a limpeza de pele antes de iniciar qualquer tratamento de pele, pois aumenta a permeabilidade cutânea.

Use este aparelho apenas para acnes. Não use este aparelho para lesões na pele como pintas, verrugas ou pelos encravados.

### **Passo 1 - Pressione o Botão de energia**

Após pressionar o botão de energia você escutará um sinal sonoro, a luz indicativa de energia acenderá e a luz indicativa de funcionamento ficará piscante.

Aguarde até escutar sinais sonoros intermitentes que indicarão que o iAcne atingiu a temperatura ideal.

### **Passo 2 - Pressione o botão de acionamento**

Ao ouvir o sinal sonoro indicativo de que o iAcne atingiu a temperatura ideal, você deverá pressionar o botão de acionamento antes que o iAcne pare com os sinais sonoros.

Após pressionar o botão de acionamento a luz indicativa de funcionamento irá acender. Retire a tampa do iAcne, você perceberá que a sonda de tratamento está emitindo luz violeta (415nm).

### **Passo 4 - Posicione e segure na acne**

Posicione o iAcne com sonda de tratamento diretamente na acne, você escutará um sinal sonoro a cada 6 segundos indicando que o aparelho está em funcionamento. Não pressione o iAcne com força sobre a pele, isso não afeta o tratamento e pode fazer com que a vermelhidão permaneça por mais tempo.


Uma sessão dura aproximadamente 3 minutos. Após esse período o iAcne emitirá sinais sonoros intermitentes novamente.


Se você quiser aplicar sobre outra acne pressione o botão de acionamento para continuar. Caso contrário o aparelho deligará automaticamente.

**Você pode tratar cada acne no máximo 3 vezes por dia.**

## Advertências e Precauções

---

- Antes de usar iAcne, é necessário realizar um teste de compatibilidade com luz em uma área de pele menos sensível (ou seja, parte interna do braço). Observe a pele tratada por 24 horas e em caso de ocorrer vermelhidão prolongada, não use o dispositivo em seu rosto. Vermelhidão temporária suave após a aplicação é normal; 
- Não cutuque ou esprema as acnes, pois isso não ajuda o processo de cura e pode causar cicatrizes;
- Se sua pele for clara, você pode estar mais propenso a apresentar vermelhidão ao redor da região de tratamento. Em quase todos os casos, tal vermelhidão é normal e não deve causar preocupação. Se você notar uma reação adversa, interrompa o uso e entre em contato com seu médico;
- NÃO derrube ou deixe o aparelho sujeito a quedas ou pancadas bruscas. Este é um aparelho de precisão e o desempenho do produto pode ser prejudicado;
- Consulte seu médico ou dermatologista antes de usar este aparelho sobre lesões cancerosas ou com suspeita de câncer;
- Entre em contato com seu médico e interrompa o uso deste aparelho em caso de reações adversas ocasionadas por ele. Não consultar o médico pode causar a piora da reação. Consulte seu médico antes de usar o aparelho se estiver tomando também algum antibiótico oral ou usando algum antibiótico tópico, ou um produto ou medicamento que possa descamar ou fazer que sua pele fique sensível ao calor;
- Use o iAcne já nos primeiros sinais de acne. Após vários tratamentos, as manchas ficam menores, ou a dor das manchas diminui. Se necessário, repita o tratamento depois de 12 horas;

- Este aparelho ajuda a reduzir as acnes e seu ciclo de vida. Quanto mais curta a vida da acne, menor a chance dela deixar uma cicatriz;
- Após o tratamento, você poderá notar vermelhidão onde a Sonda de Tratamento tocou a pele. Isto é normal e deverá desaparecer após alguns minutos.
- Não direcione a luz diretamente para os olhos. Use um tampão para os olhos quando usar o aparelho ao redor da região dos olhos. Em caso de desconforto nos olhos, interrompa o uso imediatamente e consulte seu médico;
- NÃO use este aparelho além do recomendado. O uso além do recomendado pode causar queimaduras ou lesões;
- NÃO use o aparelho se perceber que a mancha piora após o uso ou se a mancha parecer diferente do que o descrito neste manual. Se estiver preocupado sobre qualquer alteração na pele, entre em contato com seu médico;
- Não use o aparelho próximo de água corrente, pias ou banheiras; 
- Não use o aparelho sobre ou próximo à área de aplicação de uma injeção recente de esteroides;
- Não use com loções ou pomadas que contenham ingredientes produtores de calor;
- Somente para uso individual. Não compartilhe o aparelho com outras pessoas;
- Somente use o aparelho após seguir rigorosamente as instruções especificadas neste manual.

## Contra Indicação

---

- Mulheres em período gestacional;
- Regiões lesionadas;
- Regiões dos olhos e boca;
- Acnes graves;
- Cravo aberto (cravo preto) ou fechado (cravo branco);
- Acnes nodulares ou císticas graves;
- Presença de maquiagem no rosto. Limpe completamente o rosto antes de cada uso;
- Crianças;
- Rosto com as seguintes enfermidades:
  - Região inflamada em função de espinhas ou eritemas;
  - Região com metal, plástico, próteses de silicone inseridos;
  - Região pigmentada resultado de prurido, queimadura, estímulo físico;
  - Região com inflamação causada por cosméticos;
  - Região de membrana mucosa dentro da boca.

- 
- Pacientes com diabete mellitus: possível bolha de água causada por tratamentos;
  - Queimaduras de sol há duas semanas;
  - Pacientes apresentando sensibilidade recente a medicamentos fotocondutores ou que estejam tomando medicamentos fotocondutores de 560-1200nm, como por exemplo, Retinoides, neomicina, etc.;
  - Pacientes com pele sensível ao calor, ao sol ou a substâncias químicas, pois ele usa calor para tratar as acnes e este calor pode lesionar sua pele. Teste a reação de sua pele ao nível de calor deste aparelho usando-o primeiramente em seu antebraço;
  - Pacientes que usam um medicamento para tireoide ou estiver com problemas de tireoide, não use este produto sobre a glândula tireoide;
  - Pacientes que estiver tomando medicamentos que causem fotosensibilidade.



## Efeito Colateral

---

Muitos testes não relataram grandes efeitos colaterais. Entretanto, podem ocorrer alguns efeitos colaterais como dor passageira devido ao calor, breve vermelhidão na pele ou ressecamento ou descamação da pele.

Além disso, podem ocorrer alguns efeitos colaterais não listados. Normalmente, eles não requerem cuidados médicos. Se você notar qualquer outro efeito colateral, consulte seu médico.

## Proteção do Meio Ambiente

---

Como qualquer outro aparelho eletrônico, o iAcne é composto por diversos materiais, como plásticos, metais (ex. chumbo), borrachas, entre outros. Sendo assim, existem riscos de contaminação ao meio ambiente associados à eliminação deste equipamento e seus acessórios ao final de suas vidas úteis.

Preocupada com o meio ambiente, e atendendo o disposto na Lei nº 12305, de 02 de Agosto de 2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Basall orienta que o descarte deste equipamento e seus acessórios não sejam destinados em lixo comum, pois alguns materiais demoram a se decompor, causando danos ao meio ambiente.

Contate empresas no ramo de coleta seletiva e/ou reciclagem de sua cidade ou região para o destino correto destes materiais.

**O EQUIPAMENTO E SUAS PARTES DEVEM SER ELIMINADOS, AO FIM DA VIDA ÚTIL, DE ACORDO COM NORMAS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS.**

## Solução de problemas

Em caso de falha durante a operação, siga a tabela abaixo. Se o problema não for resolvido ou não trabalhar normalmente, desligue o e contate a Basall.

Problema	Causa possível	Solução possível
Aparelho não liga	Pilha fraca?	Substitua a pilha
	Polaridade das pilhas?	Posicione a pilha de acordo com os polos do aparelho
Não aquece	Pilha fraca?	Substitua a pilha

## Especificação

Dimensões:	155mm×26mm×20mm
Peso :	75 gramas (sem pilha)
Pilha:	AA - 1.5V (Corrente Contínua)
Luz:	LED com comprimento de onda 415±5nm

### Condições para uso

- Temperatura ambiente: 10°C ~ 40°C;
- Umidade relativa: 10% a 85%.

Produto cadastrado na Anvisa sob n° 80520090004

Origem: China



### Fabricante:

ACE-TEC CO, LTD

Yangwu District, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

### Importado e distribuído por:

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421 – Polo Industrial

Guaxupé/MG, CEP:37800-000

CNPJ: 09.089.140/0001-52

### Serviço de atendimento ao consumidor:

sac@basall.com.br / (35) 3559-2518

ou mais informações pelo [www.basall.com.br](http://www.basall.com.br)

## Acondicionamento

---

Armazenar em local seco, livre de umidade, poeira e sob a temperatura de 10°C a 40°C.

## Transporte

---

O aparelho deve ser transportado na embalagem original, devendo-se evitar impactos fortes durante o trajeto.

## Manutenção

---

Não recomendamos a desmontagem do aparelho. Tal violação acarretará na perda da garantia. A Basall possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada. Se o aparelho apresentar algum mal funcionamento, fora do período de garantia, entre em contato conosco para uma avaliação do problema.

## Satisfação

---

Participe da nossa pesquisa de satisfação!



Use o seu  
leitor de  
QR CODE  
do celular

## Pictogramas

---



Indica a posição vertical correta da caixa de transporte. Este lado para cima.



Conteúdo da caixa de transporte são frágeis, por isso, devem ser manuseados com cuidado



Atenção, informação importante e relevante para o correto funcionamento



Não descartar em lixo comum (ver tópico Proteção do Meio Ambiente)



Proibido derramar líquido



Embalagem reciclável