

balmak[®]

evolução. revolução.

ACTLIFE

MANUAL DO USUÁRIO



SLIMBASIC-200

Balança digital pessoal

Certificado de garantia



Modelo: _____ Opcionais inclusos: _____ Nro de série: _____

Data da compra (consumidor final): ____/____/____ Nro da nota fiscal de venda: _____

Nome do comprador (consumidor final): _____

CPF: _____ Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Este equipamento é garantido contra eventuais vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação, se consideradas as condições estabelecidas no Manual do Usuário, pelo período de 12 meses, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final e compreenderá a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de vícios de qualidade devidamente constatados como sendo de origem na fabricação. Tanto a constatação dos vícios de qualidade, como os reparos necessários serão providos por um ATAB ou ATAB AVANÇADO (Assistente Técnico Autorizado Balmak) que se encontre mais próximo do local de instalação do equipamento.

Termos e condições

Tipo da Garantia

GARANTIA TIPO BALCÃO! Caso o equipamento necessite de algum reparo durante o período de garantia, o consumidor final estará isento de quaisquer despesas com serviços (mão de obra) e materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, exceto despesas provenientes de transporte do mesmo, bem como deslocamentos técnicos.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo – obrigatoriamente – o número de série do produto adquirido, constante da nota fiscal de compra. Caso não conste, exija do vendedor para assegurar o seu direito.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Balmak.
- Houver substituição de peças originais por não originais (similares), incluindo a fonte externa (conversor AC/DC).
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação, bem como lacre e selos do IPEM e INMETRO, presentes no equipamento.
- Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou espirada a vigência do período de garantia.

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do equipamento realizada pela Balmak ou ATAB (Assistente Técnico Autorizado Balmak).
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica, tomadas, cabos de comunicação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.
- Reposição de peças pelo desgaste natural, como teclado, prato de pesagem, painéis, gabinete, bem como

a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.

Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.

- Falhas no funcionamento do equipamento decorrentes de problemas no abastecimento elétrico.
- Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.

Despesas relativas ao atendimento no local de instalação do equipamento, tais como, transporte de ida e volta; deslocamento, tempo de viagem, refeições e estada do(s) técnico(s), acrescidas dos impostos incidentes e taxas de administração.

Observações:

- Em nenhum caso a Balmak poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Balmak vier a ser responsabilizada por danos causados ao cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.
- A Balmak não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Balmak.
- Quando houver bateria interna, a garantia da bateria será de 180 dias.
- Este Certificado de Garantia é válido para equipamentos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Em caso de necessidade de reparo, utilize apenas a Rede de Suporte Técnico Autorizado Balmak. Encontre nossos ATABs e ATABs AVANÇADOS no guia que segue dentro da embalagem do produto, ou, em nosso site através do menu suporte.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Balmak.

Declaro ter recebido todas as informações e conteúdos acima descritos.


Balmak Indústria e Comércio Ltda
CNPJ 66.835.281/0001-00
0800 771 79 81 | cti@balmak.com.br
www.balmak.com.br

Assinatura Cliente

Nome do Cliente


Data

→ Características e especificações

- Auto ON (quando colocado 5Kg ou mais sobre a superfície)
- Auto OFF
- Sistema de pesagem através de sensores (4 células de carga) de alta precisão;
- Capacidade Máxima: 200kg / 440lb / 31st
- Capacidade Mínima: 5kg / 11lb / 0,78st
- Divisão: 0.1kg / 0.2lb / 0.015st
- Plataforma em vidro temperado;
- Indicação de bateria fraca; 
- Funcionamento com bateria: 1 bateria de lítio CR2032
- Display LCD

→ Instalando e/ou substituindo a bateria

- A bateria de lítio CR0232 está localizada dentro da embalagem do equipamento, localize a tampa do suporte da bateria na parte de trás da balança;
- Abra a tampa da bateria, instale-a dentro do suporte (certifique-se o polo positivo da balança está virado para cima).

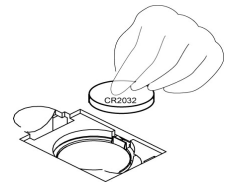

→ Instruções de operação

- Posicione a balança sobre piso firme, liso e plano;
- Suba na balança. Mantenha-se firme e equilibrado sobre a plataforma. O visor mostrará o seu peso.
- Em ausência de uso, a balança será desligada.

→ Informações importantes

- Você deve colocar a balança em superfície plana e limpa antes de usar. Não utilize a balança sobre tapete ou carpete.
- Não coloque a balança em piso molhado, muito quente ou superfícies extremamente frias
- Para assegurar precisão na pesagem, após mudar a balança de local, primeiro ligue-a e permita que ela se desligue automaticamente para o ajuste de zero. Caso contrário, a balança poderá apresentar irregularidade nos resultados de pesagem.
- Não submergir o produto;
- Utilize pano macio com álcool para limpar a superfície. Evite o uso de sabões e outros produtos químicos
- Somente para uso doméstico. Não é aconselhado para uso profissional. Instrumento não submetido a aprovação/verificação metrológica. Não legal para uso no comércio. Não legal para prática médica. Conforme Portaria INMETRO 236/94. A balança poderá apresentar variação aproximada de até 5% para mais ou para menos na pesagem e nas análises corporais (caso possua).
- Verifique o mau funcionamento da bateria da balança. Se necessário, instale nova bateria. Para outros problemas, entre em contato a assistência técnica mais próxima ou diretamente com a fábrica através do e-mail e telefone para contato.



balmak[®]



evolução. revolução.

Produto fabricado na China

Importado e distribuído por **Balmak Indústria e Comércio Ltda**

Rua Antonio João Abdalla, 97 – Cidade Industrial

Santa Bárbara d'Oeste – SP – Cep. 13.456-168

Webpage: www.balmak.com.br – Tel/Fax: (19) 3026-1229

Contato com **CTI (Centro Técnico Integrado)** através do telefone 0800 771 7981

ou ainda através do e-mail | cti@balmak.com.br